

UERJ

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE FÍSICA ARMANDO DIAS TAVARES



Alunos:

Matheus Ramos de Souza

Raphael Marcelo Costa de Lima

Ressonância do Spin do Elétron

Rio de Janeiro - 2024

Sumário

[Introdução](#)

[Objetivos](#)

Introdução

O momento magnético e momento angular do spin:

$$\vec{\mu}_s = -g_s \mu_B \frac{\vec{s}}{\hbar} \quad (1)$$

- g_s é o fator de Landé
- μ_B é o magneton de bohr (uma constante $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$)
- \vec{s} é o momento angular do spin

temos também que, pela quantização do momento angular do spin:

$$\vec{S}_z = m_s \hbar$$

$$m_s = \frac{\vec{S}_z}{\hbar} \quad (2)$$

onde o número quântico magnético m_s só pode assumir os valores $\pm \frac{1}{2}$

substituindo (2) em (1):

$$\vec{\mu}_s = g_s \mu_B m_s$$

sabendo que quando um campo magnético externo é aplicado, a energia associada com o momento é:

$$E = -\vec{\mu}_s \cdot \vec{B}$$

devido a quantização do spin, sabemos que só podemos ter 2 estados de energia:

1. o menor estado de energia $m_s = +\frac{1}{2}$

$$E_{min} = -\frac{g_s \mu_b B}{2}$$

2. o maior estado de energia $m_s = -\frac{1}{2}$

$$E_{max} = \frac{g_s \mu_b B}{2}$$

logo, quando o eletron for do menor estado de energia para o maior estado de energia

$$\Delta E = g_s \mu_b B$$

quando ocorre a transição entre 2 níveis de energia, sabemos que o sistema deve obrigatoriamente absorver ou emitir um fóton, então:

$$h\nu = g_s \mu_b B$$

onde podemos isolar o ν para chegar na fórmula presente no roteiro do experimento:

$$v = \frac{g_s \mu_b B}{h}$$

Efeito do campo magnético no momento angular

O campo magnético não afeta na magnetude do spin do momento angular (já que ele não faz parte da fórmula...), mas ele influencia a orientação de \vec{s} em relação a direção do campo - o que queremos afimar com isso:

$$E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

abrindo o produto escalar:

$$E = -|\mu| \cdot |B| \cos \theta$$

na ausencia de B, é impossível determinar a direção θ , agora com B...

1. $m_s = -\frac{1}{2}$ o ângulo θ será 0

2. por consequência $m_s = +\frac{1}{2}$ o ângulo θ será 180

então sabemos que só poderemos ter esses 2 estados do elétron quando está sob efeito de um campo magnético.

Objetivos

Dada a introdução, sabemos que quando há um campo magnético, podemos observar a seguinte fórmula:

$$v = \frac{g_s \mu_b \vec{B}}{h}$$

h é a constante de Planck = $6.626 \times 10^{-34} J \cdot s$

μ_b é o magneton de Bohr = 9.274×10^{-24}

então, temos como objetivo calcular g_s , a partir de dados coletados, desta maneira teremos como observar os 2 estados mostrados na introdução sobre o spin do elétron.

o fator de Landé $g_s = 2$ é o fator para o elétron.

com isso em mente montamos um experimento que conseguimos ter a frequência e a corrente que foi passada nas bobinas. Assim podemos calcular o campo magnético, que é dado por:

$$B = \frac{8\mu_0 NI}{\sqrt{125}R}$$

onde temos:

$R = 6.8 \times 10^{-2} \text{ m}$

$N = 320$, número de espiras na bobina, adimensional.

I = corrente, será coletada pelo multímetro

μ_0 é uma constante conhecida, permeabilidade do vácuo, dada por: $1.256 \times 10^{-6} N/A$

assim, podemos tentar encontrar g_s

Procedimento Experimental

Lista dos materiais utilizados:

- 1 multímetro MINPA ET2042C
- 4 cabos (para ligar os componentes)
- 1 fonte de alimentação
- gerador de rádio-frequência
- osciloscópio
- 2 bobinas de Helmholtz

conectamos os 4 cabos, a fonte, o multímetro (que será utilizado para medir a corrente entre a unidade de controle e as bobinas) e o gerador de radio-frequência.

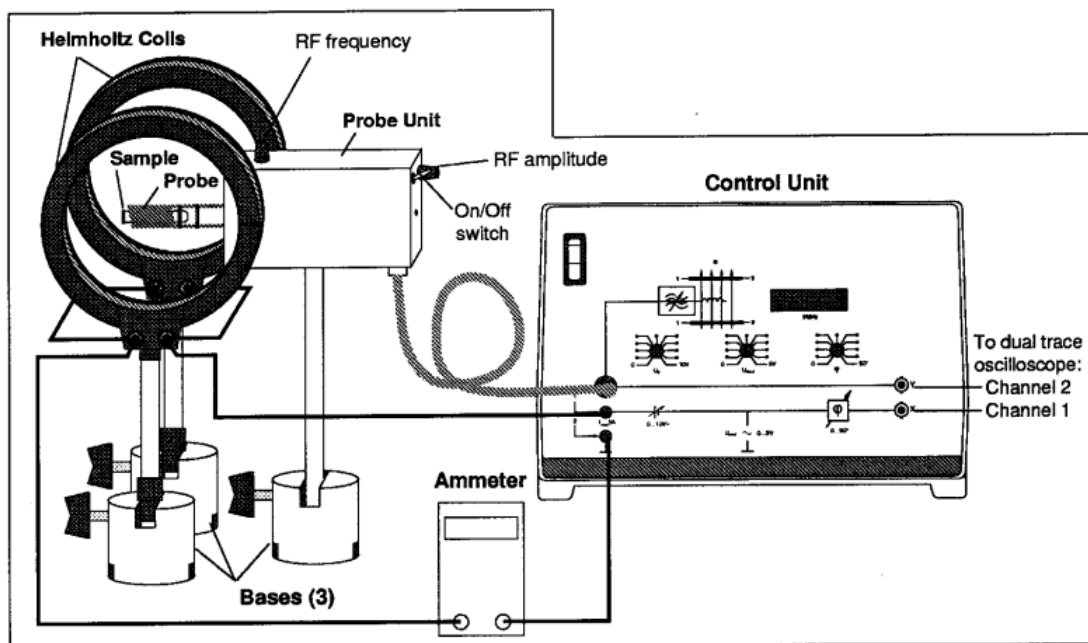


Figura 1: Experimento montado sem o osciloscópio fonte: relatório.

precisamos que as bobinas fiquem paralelas, com o "sample probe" aproximadamente na região central entre as duas, e que a distância entre as 2 bobinas deve ser aproximadamente o seu raio.

seguindo o passo a passo oferecido pelo roteiro, montamos o experimento e fizemos as 10 medidas:

I (A)	MHz	I_err (A)	B (T)
0.58	30	0.0616	0.00245298
0.63	33	0.0626	0.00266444
0.71	36	0.0642	0.00300278
0.79	39	0.0658	0.00334113
0.88	42	0.0676	0.00372176
0.92	45	0.0684	0.00389093
1	48	0.07	0.00422927
1.06	51	0.0712	0.00448303
1.11	54	0.0722	0.00469449
1.17	57	0.0734	0.00494825
1.25	60	0.075	0.00528659

com as suas respectivas unidades. Não foi pego o erro possível da frequência, porém temos o erro do multímetro: 2% + 5D.

B foi calculado a partir da fórmula disponível na parte de **objetivos**

Análise de dados

Gráfico MHz X I (amperé), onde as barras verticais representam o erro

